


MIRROLLA DENTA

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ «МИРРОЛЛА ДЕНТА».

ИНСТРУКЦИЯ

1

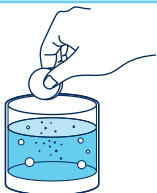

Растворите таблетку
в стакане с водой

2



На 10-15 минут
опустите протез в
полученный раствор

3



Промойте протез
чистой водой

Быстрорастворимая шипучая таблетка «MIRROLLA DENTA» для ежедневной гигиены зубных протезов. Средство способствует очищению конструкций от налета и других загрязнений даже в труднодоступных местах, одновременно устраняя неприятный запах. Обладает антимикробным эффектом.

Подходит для очистки как полностью съемных, так и частично съемных зубных протезов.

Подходит для ежедневного применения.

- Борется с загрязнениями в труднодоступных местах;
- Устраняет неприятный запах;
- Бережно очищает без повреждения протеза.

Состав/Ingredients: Sodium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Perborate, Citric Acid, Sodium Laurylsulfoacetate, Potassium Monopersulfate, Tetracetylenediamine, Sodium Benzoate, Polyethylene Glycol 6000, Polymethylsiloxane.

Способ применения: снимите протез и очистите его от остатков пищи с помощью зубной щетки. В стакане с теплой водой растворите одну таблетку, опустите зубной протез в стакан таким образом, чтобы раствор полностью покрыл его. Оставьте протез в жидкости на 10-15 минут. Для максимального эффекта почистите протез мягкой зубной щеткой с использованием раствора. Затем тщательно промойте проточной водой.

Раствор после использования следует вылить. Тщательно вымойте руки.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза, при попадании тщательно промыть большим количеством теплой воды в течение нескольких минут. Не глотать, не использовать в качестве ополаскивателя для полости рта. Избегать попадания раствора в полость рта. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов.

Количество: 20 шт.

Номинальная масса: 80 г (g) (4 г*20 шт.).

Срок годности: 3 года.

Условия хранения: хранить при температуре от +5°C до +25°C, в сухом, недоступном для детей месте.

Дата изготовления и партия: указаны на упаковке.

Изготовитель и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей в РФ: ООО «Мирролла Лаб», 188663, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, кор. 361А, пом. 2-Н. Адрес производства: 188663, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.г.т. Кузьмоловский, д. 6/Н, корпус 186. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrolla.ru.

ГОСТ 7983-99 (П.П. 3.1.4.), ГОСТ 32117-2013 (П.П.3.6.)

KZ Тіс протездерін тазалауға арналған «MIRROLLA DENTA» құралы.

Тіс протездердің күнделікті гигиенасына арналған жылдам еритін көпіршікті «MIRROLLA DENTA» таблеткасы. Құрал, бір мезгілге жағыссыз иісті кетіріп, құрылымды өңезден және басқа ластанулардан тіпті қолжетімділігі қиын жерлерде тазалауға мүмкіндік береді. Микробтарға қарсы әсер етеді.

Толық алмалы-салалы протездерді, сонымен қатар ішінара алмалы протездерді тазалауға жарамды.

Күнделікті пайдалануға арналған.

- Қолжетімділігі қиын жерлерде ластанумен күреседі;
- Жағымсыз иісті жояды;
- Протезді бүлдірмей, күтіммен тазалау.

Құрамы: Sodium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Perborate, Citric Acid, Sodium Laurylsulfoacetate, Potassium Monopersulfate, Tetracetylenediamine, Sodium Benzoate, Polyethylene Glycol 6000, Polymethylsiloxane.

Пайдалану тәсілі: протезді шешіңіз және оны тіс щеткасының көмегімен тамақ қалдықтарынан тазалаңыз. Жылы су құйылған стақанда бір таблеткасын ерітіңіз, тіс протезін стақанға ерітінді оны толық жабатындай етіп салыңыз. Протезді сұйықтықта 10–15 минутқа қалдырыңыз. Максималды әсерге жету үшін протезді ерітіндіні пайдаланып тіс щеткасымен тазалаңыз. Содан кейін ағынды сумен мұқият жуып-шайыңыз. Пайдаланғаннан кейін ерітіндіні төгіп тастау қажет. Қолды мұқият жуу керек.

Сақтық шаралары: көзге түсуіне жол бермеу, түскенінде бірнеше минут ішінде судың көп мөлшерімен жуып-шаю керек. Жұтпау, ауыз қуысын шайғышы ретінде пайдаланбау керек. Ауыз қуысына түсуіне жол бермеу керек. Құрауыштарды жеке көтере алмаушылық болуы мүмкін.

Саны: 20 дана.

Атаулы салмағы: 80 г (g) (4 г*20 дана).

Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Сақтау ережелері: +5°C-ден +25°C дейінгі температурада, құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Дайындалған күні және топтамасы: қаптамада көрсетілген.

Өндіруші және РФ-да тұтынушылардан наразылықтарды қабылдауға уәкілетті ұйым «Мирролла Лаб» ЖШҚ, 188663, Ресей, Ленинград обл., Всеволожск ауданы, Кузьмоловский қ. ұ. а, Заводская к-сі., 3-үй, 361А-кор., 2-Н-үй-жай. Өндірістің мекенжайы: 188663, Ресей, Ленинград обл., Всеволожск ауданы, Кузьмоловский қ. ұ. а., н/ж үй, 186-корпус. Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru. ГОСТ 7983-99 (П.П.3.1.4.), ГОСТ 32117-2013 (П.П.3.6.)

КҮ «MIRROLLA DENTA» тиш протездерін тазалоо үчүн каражаты.

Тиш протездеринин күнүмдүк гигиенасы үчүн «MIRROLLA DENTA» тез эрүүчү шуулдак таблеткасы. Каражат конструкцияларды жетүү кыйын болгон жерлердегі өңөрдөн жана башка булгануулардан тазалоого өбөлгө түзөт жана жағымсыз жытты жок қылат. Микробдорго каршы таасирге ээ.

Толугу менен жана жарым-жартылай чечилүүчү тиш протездерин тазалоого жарайт.

Күнүмдүк колдонууга жарайт.

- Жетүү кыйын болгон жерлердегі булгануу менен күрөшөт;
- Жағымсыз жытты жок қылат;
- Протезге зыян келтирүүсүз жұмшак тазалоо.

Құрамы: Sodium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Perborate, Citric Acid, Sodium Laurylsulfoacetate, Potassium Monopersulfate, Tetracetylenediamine, Sodium Benzoate, Polyethylene Glycol 6000, Polymethylsiloxane.

Колдонуу ыкмасы: протезді чечип, аны тиш щеткасының жардамында тамақтың қалдықтарынан тазалаңыз. Бір таблетканы бір стакан жылуу сууга эритип, протезді эритме толугу менен жапқандай қылып салыңыз. Протезді суюктукта 10–15 мүнөт кармаңыз. Максималдуу натыйжа алуу үчүн протезді жұмшак тиш щеткасы менен эритмеде тазалаңыз. Андан кийін жылуу суу менен жақшылап чайқаңыз. Эритмени колдонгондон кийін төгүп салуу керек. Колдоруңузду жақшылап жууңуз.

Сактык чаралары: көзге кирип кетүүсүнөн сак болуңуз, көзге кирип кеткен учурда бир нече мүнөттүн ичинде чоң көлөмдегі суу менен жақшылап жууп кетириңіз. Жутууга болбойт, оозду чайкоочу каражат катары колдонбоңуз. Эритменин ооз көңдөйүнө кирип кетүүсүнөн сак болуңуз. Компоненттерді көтерө албастык орун алышы мүмкүн.

Саны: 20 даана.

Номиналдық салмак: 80 г (g) (4 г*20 даана).

Жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.

Сактоо шарттары: балдардын колу жетпеген кургак жерде +5°Стан +25°Ска чейинки температурада сактоо керек.

Даярдалған күні жана партиясы: таңғакта көрсөтүлгөн.

Даярдоочу жана РФте керектөөчүлөрдөн дооматтарды кабыл алууга ыйгарым укуктуу ұйым «Мирролла Лаб» ЖЧК, 188663, Россия, Ленинград обл., Всеволожский р-ну, Кузьмоловский ш.т.п., Заводская көч., 3-үй, кор. 361А, 2-Н. Өндүрүштүн дареги: 188663, Россия, Ленинград обл., Всеволожский р-ну, Кузьмоловский ш.т.п., н/ж үй, 186-корпус. Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru. ГОСТ 7983-99 (П.П.3.1.4.), ГОСТ 32117-2013 (П.П.3.6.)